

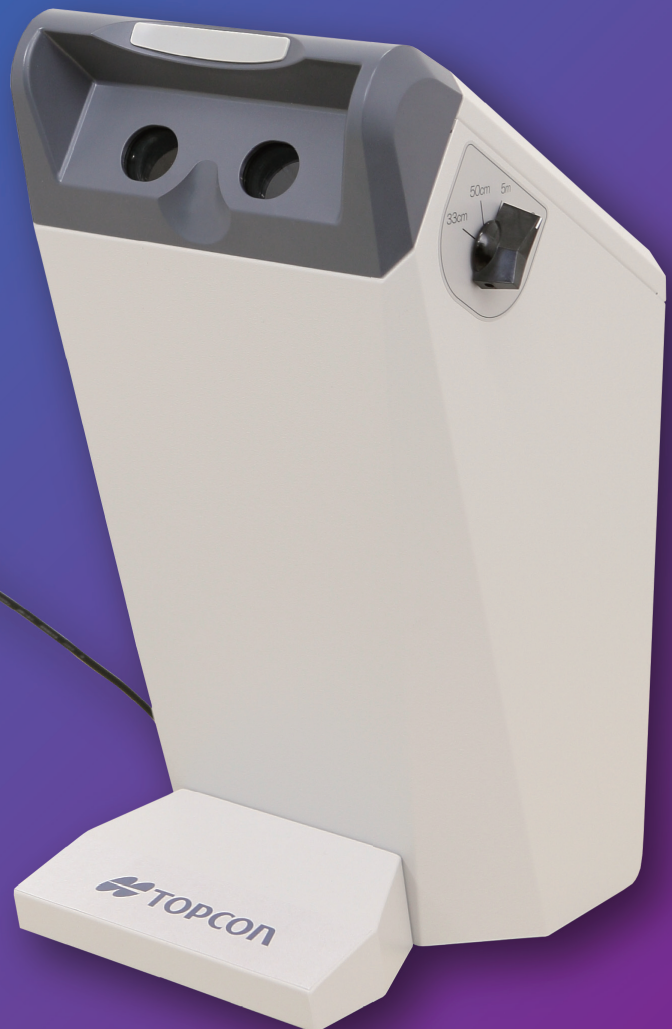
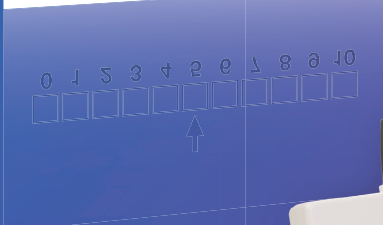
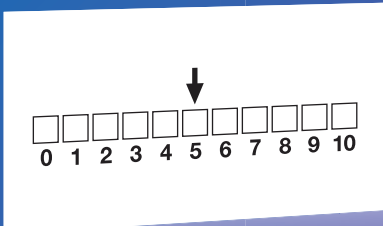
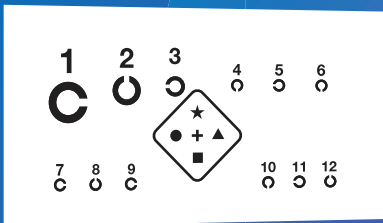


スクリーンスコープ SS-5

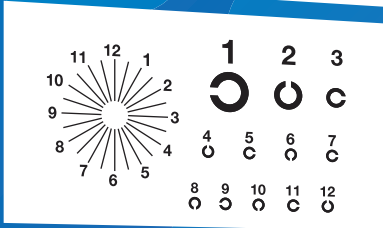

どこでも・簡単操作・視力チェック

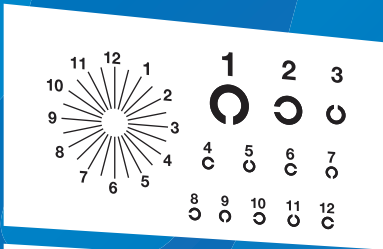

学校で
集団検診



企業で
健康診断、VDT作業による
視力チェック



自動車教習所で
免許取得の視力チェック

3つの検査距離・簡単なダイヤル切替



遠見
5m



近見
50cm




近見
33cm




充実した視機能検査視標

ランドルト環による 0.1～1.5 までの右・左・両眼の視力検査、乱視検査、立体視検査、眼位検査が可能です。ダイヤル切替で遠視用レンズを加入でき、眼性疲労の原因となる遠視のチェックも簡単です。


右眼検査・乱視検査

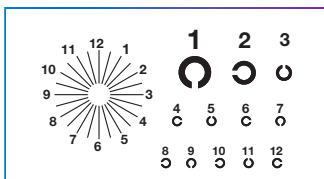


左眼検査・乱視検査

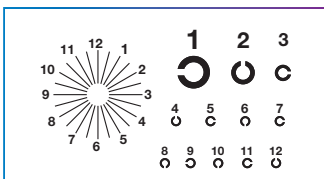

両眼検査・立体視検査

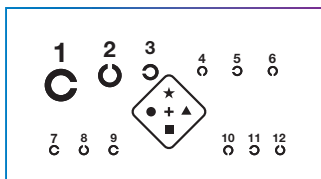

眼位検査

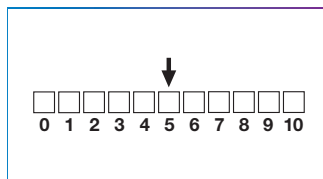

健診に配慮した操作性

視標の切り替えは手元のコントローラーで行えます。使用しないときは背面ホルダーに収納できます。長寿命のLEDを採用。照明交換の心配が軽減できます。



■ 専用キャリングケース (別売)



■ 仕様

電源電圧	100V 50/60Hz
電源入力	5VA
外形寸法 / 重量	220 (W) × 275 (D) × 409 (H) mm / 6 kg
届出番号	23B1X00010100001

株式会社 トプコンメディカルジャパン

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)5915-1800 FAX.(03)5915-1805
 営業本部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)5915-1803 FAX.(03)5915-1805
 IC事業推進部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)5915-1804 FAX.(03)5915-1805
 東京営業所 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)6867-0123 FAX.(03)6867-0124
 札幌営業所 〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西1-21-1第3弘安ビル6F TEL.(011)-520-2150 FAX.(011)-520-2151
 仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町1-3-2 仙台MDビル1階 TEL.(022)722-0637 FAX.(022)722-0638
 横浜営業所 〒224-0032 横浜市中区新町11-3ケルネスセンタープラザビル101号室 TEL.(045)949-3600 FAX.(045)949-3604
 名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市中区東横2-9-1高岳セントラルビルディング2階 TEL.(052)934-0761 FAX.(052)934-0762
 大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-5-15進徳第六ビル2階 TEL.(06)7659-2904 FAX.(06)7659-2906
 広島営業所 〒733-0013 広島市西区横川新町8-22(ランドマーク横川) TEL.(082)294-8971 FAX.(082)294-8994
 松山営業所 〒791-1105 松山市北井門2-12-7(エシヤンジュル松山103) TEL.(089)969-1427 FAX.(089)969-1428
 福岡営業所 〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目10-50 MR博多ビル TEL.(092)483-3751 FAX.(092)483-3753

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

株式会社 トプコン ホームページ <https://www.topcon.co.jp>

本社・アイケア事業管理部営業課 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)3558-2506

製造販売 株式会社 トーメコーポレーション 〒451-0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号 TEL.(052)581-5321

TMJ101-1